

ROTAID™
AED CABINETS

2025 M. KATALOGAS

01.100.04

Rotaid Pagrindinės vertybės

Rotaid misija yra aiški...

"Mes tapsime pasauliniu gyvybę gelbstinčio defibriliatoriaus simboliu".

Kad tai pasiektume, mūsų gaminiai ir bendrovė remiasi 3 principais:



Greita

Kiekviena sekundė svarbi ištikus širdies sustojimui. Todėl mūsų gaminius galima greitai rasti, jie taupo laiką naudojant ir gali būti įrengiami viešose vietose, kad padėtų išgelbėti gyvybes.



Paprasta

Jei norime, kad visi naudotųsi defibriliatoriumi ir suteiktų pagalbą, mūsų spintelės turi būti intuityvios, patogios, nesudėtingos ir raminančiai paprastos.



Tvaru

Naudojant naujausias technologijas ir perdirbtas medžiagas, mūsų gaminiai atitinka aukščiausius aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės standartus.

***Rotaid įkvėpimas
kilo iš gelbėjimosi rato, pripažįstant jo
paprastumą
tačiau gyvybiškai svarbią savybę:***

***jo paskirtis ir pritaikymas yra visuotinai
suprantamas."***

Turinys

Informacija apie gaminį

Pagrindinės Rotaaid vertybės
2 psl.

Rotaaid kokybė
4 psl.

Palyginimo lentelė
5 psl.

Priedai

Rotaaid – Informacinis stendas
22 psl.

Rotaaid – Totem Stovas
24 psl.

Peržiūros numeris: 01.100.03

Produktai

Rotaaid - 24/7
6 psl.



Rotaaid - Solid Plus su Signalizacija
11 psl.



Rotaaid - Solid Plus su šildymu ir Signalizacija
16 psl.



Rotaid kokybė

Rotaid™ AED spintelės buvo testuojamos sudėtingomis sąlygomis, siekiant užtikrinti defibriliatorių laikymo kokybę įvairiose vietose, tiek patalpų viduje, tiek lauke.

Programos metu imituotos ekstremalios oro sąlygos, įvertinti saugojimo reikalavimai ir viešasis naudojimas, taip pat atsižvelgta į naujus AED gamintojų reikalavimus dėl AED būklės monitoravimo galimybių.

Pasitelkusi daugiau nei 85 000 pagamintų spintelių patirtį, **Rotaid nustatė naują pasaulinį standartą.**

Pasaulinė laboratorinių tyrimų lyderė **Eurofins**, teikianti daugiau kaip 200 000 patvirtintų metodų, ir jos dukterinė įmonė "EAG Laboratories", turinti 40 metų medžiagų bandymų patirtį, objektyviai patvirtino Rotaid sprendimų kokybę.



IP56



IK10



-20 Celsijaus



Dviguba apsauga
nuo UV spindulių



Apsauga nuo
druskų miglos



Saugus 24 V veikimas



Atitinka BDAR
reikalavimus



Atitinka ES-MDR
reikalavimus



Atitinka CE reikalavimus

Palyginimo lentelė



Rotaaid Solid Plus su Signalizacija



Rotaaid Solid Plus su Šildymu ir Signalizacija



Rotaaid 24/7

Panaudojimas

Naudojimas patalpose



Naudojimas lauke (nesant šalčiui)



Naudojimas lauke (esant šalčiui)



Kokybės standartai

IP56



IK10



Apsauga nuo druskų



Apsauga nuo UV spindulių



Nėra WiFi / GSM signalo trukdžių



Apsauga nuo šalčio iki -20 Celsijaus



Funkcijos

Garsinė signalizacija



Šildymo sistema



LED apšvietimo sistema



Vizualinė signalizacija



Rotaaid išmanūs sprendimai

AED savikontrolės gedimo aptikimas



Gelbėtojo įspėjimo sistema



AED vietos aptikimas



Spintos atidarymo / uždarymo aptikimas



Integruotas GPS



AED ir priedų galiojimo terminų valdymas



Internetinis valdymo portalas



SMS / el. pašto pranešimų sistema



Integruota SIM kortelė su pasauliniu ryšiu



Kaina Eur be PVM

247,10

495.04

698.34

Kaina Eur su PVM

299

599

845



Rotaid™

24/7

Rotaid 24/7

Rotaid 24/7 AED spintelė apjungia apsaugą su pažangia, išmania ir nuotolinio stebėjimo technologija, užtikrindama, kad jūsų AED visada būtų pasiekiamas ir paruoštas naudoti. Ją galima pastatyti tiek patalpose, tiek lauke, kad būtų maksimaliai padidintas jūsų gelbėjimo įrangos pasiekiamumas.

Dėl išskirtinės formos ir LED apšvietimo gerai matomas ir randamas tiek dieną, tiek naktį. Ant permatomo dangtelio yra AED emblema, 4 nurodomosios rodyklės nurodančios, kaip atidaryti ir 8 įdubos, kad būtų galima maksimaliai suimti bet kokiomis oro sąlygomis.

Užtenka tik greitai ir intuityviai pasukti, kad itin greitai ir lengvai pasiektumėte gelbėjimo įrangą. Reguluojama garsinio ir LED signalo sistema įspėja aplinkinius ir apsaugo jūsų investicijas.

Sukurta itin patvari, tvirta kaip uola konstrukcija, atlaikanti atšiaurias oro sąlygas. Užtikrina tvirtą apsaugą nuo smūgių, o jos šildymo sistema apsaugo AED nuo šalčio iki -20 °C. Pirmaujanti pasaulyje apsauga nuo išorinio įsiskverbimo IP56 užtikrina geriausią įmanomą apsaugą nuo vandens, druskos miglos ir dulkių.



Rotaid 24/7 spintelėje įmontuota SIM kortelė, kuri užtikrina patikimą ryšį tiek 2G ir 4G (CAT-M1) tinklais.






GPS antena automatiškai registruoja ir identifikuoja savo padėtį "Google" žemėlapiuose ir aptinka bei įspėja, kai spinta perkeliama į naują vietą.



**Išgelbėkite daugiau
gyvybių su Rotaid
24/7**

Naudojant Rotaid Smart Services, 24/7 spintelė papildo ją pažangiomis nuotolinio stebėjimo galimybėmis, kurios nuolat prižiūri jūsų gyvybę gelbstinčią sistemą ir per kelias sekundes įspėja, kai sistema naudojama, reikia atlikti techninę priežiūrą ar reikia nedelsiant atkreipti jūsų dėmesį.

Naudojant šią technologiją, jūsų gyvybę gelbstintis AED yra visada pasirengęs gelbėti, kai to prireikia kritiniu atveju.

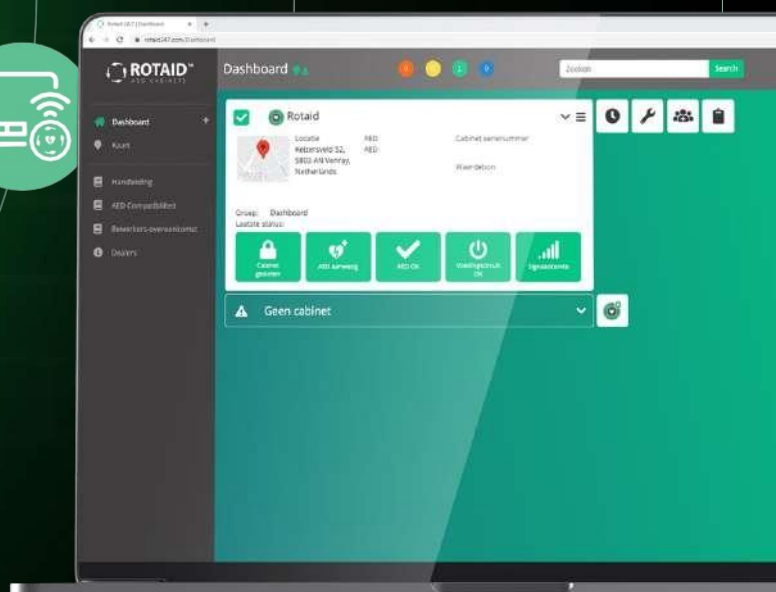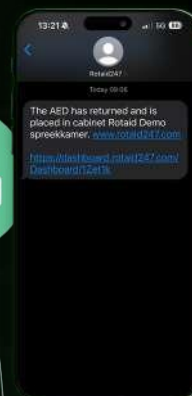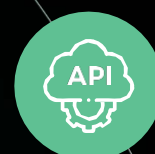

Pagrindinės funkcijos



24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę vykdoma nuotolinė AED ir spintos stebėseną

Pažangi, patikrinta ir patvirtinta spintelės technologija nedelsiant aptinka jūsų AED savikontrolės gedimą, elektrodų ir baterijos galiojimo datas bei techninės priežiūros poreikius. Ji taip pat aptinka AED išėmimą (ir grąžinimą) iš spintelės ir spintelės atidarymą (ir uždarymą). GPS sistema pažymi ir žemėlapyje nurodo jūsų gelbėjimo įrangos vietą.



Pritaikymas

Pritaikykite spintelės spalvą ir signalizacijos nustatymus pagal savo pageidavimus, prekės ženklą ar aplinką. Papildykite savo AED nuotolinio stebėjimo galimybes. Koreguokite bet kuriuo metu ir taip dažnai, kaip pageidaujate.



Internetinis valdymo portalas ir prieiga

Stebėkite ir valdykite savo AED būklę bet kada ir bet kur. Naudodamiesi internetine stebėsenos sistema gaukite pranešimus iš savo gyvybę gelbstinčios įrangos tinklo. Tvarkykite aptarnavimo ir techninės priežiūros reikalavimus, atsisiųskite ataskaitas, keiskite ir pritaikykite savo tinklą bei valdykite savo gelbėtojų komandą.



Pranešimai realiuoju laiku

Gaukite momentinius įspėjimus, kad būtumėte informuoti apie AED ir spintų tinklo būseną tiek savo portale, el. paštu arba SMS žinute, nepriklausomai nuo to kokį įrenginį naudojate. Nustatykite pranešimų gavėjų grupę kiekvienam asmeniui arba spintų grupei, kad užtikrintumėte greitą, veiksmingą ir momentinį reagavimą.



Kelių naudotojų prieiga

Suteikite skirtingiems naudotojams prieigą stebėti ir valdyti savo AED ir vienu mygtuko paspaudimu kurkite, keiskite ir pritaikykite gyvybę gelbstinčias komandas.



API integracija

Sklandžiai prijunkite prie savo esamų sistemų, kad informacija būtų teikiama automatiškai, arba prie išorinės AED sistemos.

Spalvų pasirinkimai



Rotaïd™ 24/7


Specifikacijų lapas

Taikymas

Skirta naudoti patalpose ir lauke

Matmenys

Ilgis	: 48 cm	18,9 colio
Plotis	: 48 cm	18,9 colio
Gylis	: 18 cm	7,09 colio
Svoris	: 4 kg	8,82 lb

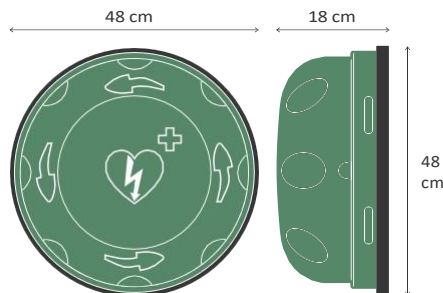

Kokybė

Apsauga nuo dulkių ir vandens	: IP56	Standartas : IEC 60529
Atsparumas smūgiams	: IK10	Standartas : IEC 62262
Druskos miglos bandymas	: Išlaikytas	Standartas: IEC 60068-2-52
Signalų trukdžiai	: Nėra 2G/3G/4G/5G / WiFi / Bluetooth trukdžių	
AED apsauga nuo užšalimo	: -20 laipsnių Celsijaus	
Bandomasis korpusas	: Eurofins	

CE sertifikatas

EN60601-1-1 / EN60601-1-2:2015 Ed4 / EN55011:2009+ A1:2010 / EN61000-4-2 / EN61000-4-3 / EN61000-4-4 EN61000-4-5 / EN61000-4-6 / EN61000-4-7 / EN61000-4-8 / EMC direktyva 2014/30/ES
Bandymų įstaiga : BICON laboratorijos

Maitinimas

Elektros sauga	: Atliktas bandymas pagal IEC 60335-1
Šildymo sistema	: 92 W bendra galia / automatinis termostatas
Transformatoriaus blokas	: 90W AC-DC pramoninis adapteris - MeanWell

Pagrindinė plokštė

- 100 % polikarbonatas, atspari UV poveikiui, anglies pluošto apdaila
- Vandeniui nepralaidus guminis sandariklis maitinimo laidams
- ABS montavimo blokas, skirtas AED patalpinti
- 4 įleistos montavimo skylės tvirtinimui prie konstrukcijos
- Tvirtas plieninis kabliliukas, kad būtų galima pritvirtinti etiketę arba plombą
- Spausdintos montavimo instrukcijos

Įvesties transformatoriaus blokas	: 100-240 V, 2,5 A (2,5 A), 50-60 Hz
-----------------------------------	--------------------------------------

Išėjimo transformatoriaus blokas	: 24Vdc, 5A (5 A)
Transformatoriaus matmenys	: 145 x 60 x 32 mm (D x Š x V)

Saugos standartai

- UL60950-1 / CSA C22.2 / TUV EN60950-1 / BSMI CNS 14336 / CCC GB4942 / PSE J60950-1
- AS/NZS 60950.1 / BIS IS 13252 / KC K60950 / EAC TP TC 004 / SIRIM MS IEC60950

Ryšys

Tinklas	: 2G, 4G (LTE-M, CAT-M1), pasaulinė aprėptis
GPS	: GPS antena, tikras signalas
Signalizacija	: 84 dB arba 98 dB, matuojant 1 metro atstumu nuo garsiakalbio

Pakuotė

Į komplektą įeina visos tvirtinimo medžiagos, montavimo šablonas ir instrukcija.
Dėžutės dydis 50 x 50 x 40 cm (19,7 x 19,7 x 15,75 colių), sertifikuota FSC, 100 proc. perdirbtas kartonas.

Dangtis

- 100 % polikarbonatas, dengtas dvigubu UV apsaugos sluoksniu, žalios skaidrios spalvos, specialus IR spindulių filtras sumažinantis šilumos praskiskverbimą
- Centruotas baltas ILCOR AED logotipas
- 4 pagalbinės rodyklės naudotojui orientuotis
- 8 įdubimai užtikrina sukibimą atidarant
- Magnetis pavojaus signalui įjungti

Suderinamumas

Norėdami patikrinti AED suderinamumą, nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą arba eikite į: www.rotaïd.com/aed-compatibility





Rotaid™

Solid Plus su Signalizacija

Rotaid Solid Plus su Signalizacija

Rotaid Solid Plus su signalizacija yra itin tvirta ir ilgaamžė AED sieninė spintelė, užtikrinanti matomą, patikimą ir tvary Jūsų AED įrenginio laikymą.

Dėl išskirtinės formos ir dizaino ją lengva rasti, o norint pasiekti AED, tereikia pasukti dangtį. Ant dangtelio yra AED logotipai ir nurodymų rodyklės, kad neliktų vietos interpretacijoms.

Spintelė atidaroma lengvai, intuityviai pasukus dangtį jis nusiima. Todėl reaguojantis asmuo turi visą prieigą prie AED, kad galėtų greitai ir lengvai jį paimti. Dangtis prie galinės plokštės pritvirtinamas dirželiu ir jam nereikia jokio papildomo gelbėtojo dėmesio. Ant nerūdijančio plieno kabliuko, pritvirtinto korpuso apačioje, galima laikyti plombą, žymę ir panašiai.

Dangtis turi įdubimus optimaliam sukibimui ir krypties rodyklės, pagamintas iš 100% polikarbonato.

Jis suteikia tvirtą apsaugą ir užtikrina aukštą atsparumo vandeniui ir dulkiams lygį. Dangtyje yra UV filtrai, užtikrinantys ilgalaikį skaidrumą. Neleidžiama atsirasti blukimui, irimui, rūdims ir šiukšlių bei dulkių kaupimuisi viduje.





1. AED laikiklis

2. Įrengimo instrukcijos

3. Garsinė signalizacijos sistema

4. Anglies pluošto apdaila

5. Kietas plieninis kablys

6. 100 % UV spindulius stabilizuojantis polikarbonato plastikas (perdirbtas)



Rinkoje pirmaujantys kokybės standartai

IP56	Apsaugotas nuo riboto dulkių patekimo ir apsaugotas nuo smarkios jūros ar galingų vandens srovių.
IK10	Apsaugotas nuo 20 džaulių smūgio, užtikrinant kuo tvirtesnę konstrukciją.
UV	Dvigubi UV filtrai ir stabilizatoriai užtikrina ilgai išliekančią kokybišką išvaizdą.
Druskos migla	Visiškai apsaugotas ir atsparus korozijai nuo druskos miglos.
Trikdžiai	Netrukdo "WiFi", "Bluetooth" ar mobiliojo ryšio protokolams, kad būtų galima saugoti prijungtą įrenginį.
Išbandyta ekspertų	Visi standartai buvo išbandyti ir sertifikuoti "Eurofins" (www.eurofins.com) bandymų įstaigoje.

Spalvų pasirinkimai

Permatoma žalia, permatoma žalia su raudona, žalia arba geltona apdaila



Rotaaid Solid Plus su Signalizacija


Specifikacijų lapas

Taikymas

Skirta naudoti visose patalpose.
Galima naudoti lauko aplinkoje, jei temperatūra nenukrenta žemiau 5 laipsnių Celsijaus.

Matmenys

Ilgis	: 48 cm	18,9 colio
Plotis	: 48 cm	18,9 colio
Gylis	: 18 cm	7,09 colio
Svoris	: 1,8 kg	4,1 lb

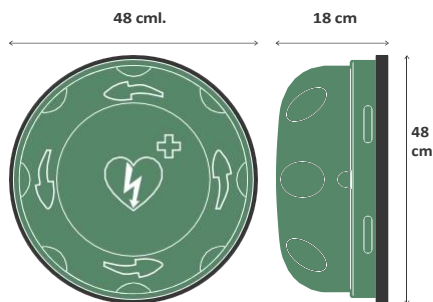

Pargindinė plokštė

- 100 % polikarbonatas, atspari UV poveikiui, anglies pluošto apdaila
- Tvirtinimo blokas ir vieta AED tvirtinimui
- 4 įleistos montavimo skylės tvirtinimui prie konstrukcijos
- Tvirtas plieninis kabliukas, kad būtų galima pritvirtinti etiketę arba plombą
- Spausdintos montavimo instrukcijos

Dangtis

- 100 % polikarbonatas, dengtas dvigubu UV apsaugos sluoksniu, žalios skaidrios spalvos, specialus IR spindulių filtras sumažinantis šilumos prasiskverbimą
- Centruotas baltas ILCOR AED logotipas
- 4 krypties rodyklės naudotojui orientuotis
- 8 įdubimai užtikrina sukibimą atidarant
- Magnetis pavojaus signalui įjungti

Suderinamumas

Norėdami patikrinti AED suderinamumą, nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą arba eikite į: www.rotaaid.com/aed-compatibility



Garsinė signalizacijos sistema

- Korpusas
- Reguliuojamas garsumo nustatymas: 84 dB ir 98 dB
- Raudonas mygtukas skirtas laikinai pristabdyti signalizaciją
- Maitinamas dviem AA tipo baterijomis (įeina į komplektą)
- Įsijungia pasukus dangtį

Kokybė

Apsauga nuo dulkių ir vandens	: IP56	Standartas : IEC 60529
Atsparumas smūgiams	: IK10	Standartas : IEC 62262
Druskos rūko bandymas	: Išlaikytas	Standartas: IEC 60068-2-52
Signalo trukdžiai	: Nėra 2G/3G/4G/5G / WiFi / Bluetooth trukdžių	
Bandymo įstaiga	: Eurofins	

Modulinė konstrukcija

Suderinama su visų gamintojų ir tipų AED.

Galimas atnaujinimas įdiegiant Rotaaid™ šildymo sistemą arba Rotaaid™ 24/7" ryšio moduliu.

Pakuotė

Priedamos visos tvirtinimo medžiagos, montavimo šablonas ir instrukcija.
Dėžės dydis 50 x 50 x 25 cm (19,7 x 19,7 x 9,84 colių).
FSC sertifikuota, 100 % perdirbta kartoninė dėžė.



Rotaid™

Solid Plus su Šildymu ir
Signalizacija

Rotaid Solid Plus su Šildymu ir Signalizacija

Rotaid Solid Plus su Šildymu ir Signalizacija yra itin tvirta ir ilgaamžė AED sieninė spintelė, užtikrinanti matomą, patikimą ir tvarų Jūsų AED įrenginio laikymą lauke.

Dėl išskirtinės formos ir dizaino ją lengva rasti, o norint pasiekti AED, tereikia pasukti dangtį. Ant dangtelio yra AED logotipai ir nurodymų rodyklės, kad neliktų vietos interpretacijoms.

Spintelė atidaroma lengvai, intuityviai pasukus dangtį jis nusiima. Todėl reaguojantis asmuo turi visą prieigą prie AED, kad galėtų greitai ir lengvai jį paimti. Dangtis prie galinės plokštės pritvirtinamas dirželiu ir jam nereikia jokio papildomo gelbėtojo dėmesio. Ant nerūdijančio plieno kabliuko, pritvirtinto korpuso apačioje, galima laikyti plombą, žymę ir panašiai

Dangtis turi įdubimus optimaliam sukibimui ir krypties rodyklės, pagamintas iš 100% polikarbonato.

Jis suteikia tvirtą apsaugą ir užtikrina aukštą atsparumo vandeniui ir dulkių slėgį. Dangtyje yra UV filtrai, užtikrinantys ilgalaikį skaidrumą. Neleidžiama atsirasti blukimui, irimui, rūdims ir šiukšlių bei dulkių kaupimuisi viduje.





1. AED laikiklis

2. Garsinė signalizacijos sistema

3. 8 šviesos diodai maksimaliam suradimui ir matomumas visomis paros valandomis

4. Automatizuota šildymo sistema

5. Tvirtas plieninis kablys

6. 100 % UV spindulius stabilizuojantis polikarbonatas plastikas (perdirbtas), anglies pluošto apdaila

**Visiškai
automatizuota
šildymo sistema,
skirta laikyti AED
iki -20 laipsnių
Celsijaus**

Specialiai pritaikyta šildymo sistema užtikrina, kad AED išliktų darbinėje temperatūroje ir per šalčius. 8 LED lemputės užtikrina, kad spintelę galima greitai rasti tamsoje. Visa sistema veikia visiškai automatiškai ir yra lengvai montuojama.

Visos medžiagos išbandytos lauke ir užtikrina ilgalaikę AED ir spintelės apsaugą.

Spintelę saugo garsinė signalizacijos sistema.

Rinkoje pirmaujantys kokybės standartai

IP56	Apsaugotas nuo riboto dulkių patekimo ir apsaugotas nuo smarkios jūros ar galingų vandens srovių.
IK10	Apsaugotas nuo 20 džaulių smūgio, užtikrinant kuo tvirtesnę konstrukciją.
UV SPINDULIAI	Dvigubi UV filtrai ir stabilizatoriai užtikrina ilgai išliekančią kokybišką išvaizdą.
Druskos rūšas	Visiškai apsaugotas ir atsparus korozijai nuo druskos miglos.
Trikdžiai	Netrukdo "WiFi", "Bluetooth" ar mobiliojo ryšio protokolams, kad būtų galima saugoti prijungtą įrenginį.
Apsauga nuo šalčio	AED apsauga nuo šalčio iki -20 laipsnių Celsijaus.
Išbandyta ekspertų	Visi standartai buvo išbandyti ir sertifikuoti "Eurofins" (www.eurofins.com) bandymų įstaigoje.



Spalvų pasirinkimai

Permatoma žalia, permatoma žalia su raudona, žalia arba geltona apdaila



Rotaïd™ su Šildymu ir Signalizacija


Specifikacijų lapas

Taikymas

Skirta naudoti lauke

Matmenys

Ilgis	: 48 cm	18,9 colio
Plotis	: 48 cm	18,9 colio
Gylis	: 18 cm	7,09 colio
Svoris	: 4 kg	8,82 lb

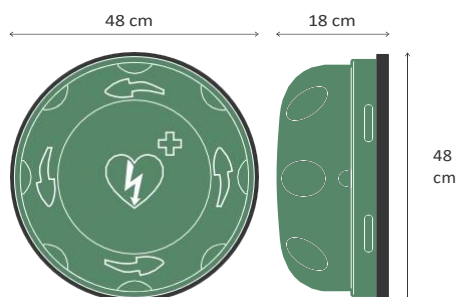

Kokybė

Apsauga nuo dulkių ir vandens	: IP56	Standartas : IEC 60529
Atsparumas smūgiams	: IK10	Standartas : IEC 62262
Druskos miglos bandymas	: Išlaikytas	Standartas: IEC 60068-2-52
Signalų trukdžiai	: Nėra 2G/3G/4G/5G / WiFi / Bluetooth trukdžių	
AED apsauga nuo užšalimo	: -20 laipsnių Celsijaus	
Bandomasis korpusas	: Eurofins	

CE sertifikatas
EN60601-1-1 / EN60601-1-2:2015 Ed4 / EN55011:2009+ A1:2010 /
EN61000-4-2 / EN61000-4-3 / EN61000-4-4 EN61000-4-5 / EN61000-4-6 / EN61000-4-7 /
EN61000-4-8 / EMC direktyva 2014/30/ES
Bandymų įstaiga : BICON laboratorijos

Maitinimas

Elektros sauga	: Atliktas bandymas pagal IEC 60335-1
Šildymo sistema	: 92 W bendra galia / automatinis termostatas
Transformatoriaus blokas	: 90W AC-DC pramoninis adapteris - MeanWell

Pagrindinė plokštė

- 100 % polikarbonatas, atspari UV poveikiui, anglies pluošto apdaila
- Vandeniui nepralaidus guminis sandariklis maitinimo laidams
- ABS montavimo blokas, skirtas AED patalpinti
- 4 įleistos montavimo skylės tvirtinimui prie konstrukcijos
- Tvirtas plieninis kabliukas, kad būtų galima pritvirtinti etiketę arba plombą
- Spausdintos montavimo instrukcijos

Dangtis

- 100 % polikarbonatas, dengtas dvigubu UV apsaugos sluoksniu, žalios skaidrios spalvos, specialus IR spindulių filtras sumažinantis šilumos prisiskverbimą
- Centruotas baltas ILCOR AED logotipas
- 4 pagalbinės rodyklės naudotojui orientuotis
- 8 įdubimai užtikrina sukibimą atidarant
- Magnetis pavojaus signalui įjungti

Šildymo sistema

Visiškai automatizuota šildymo sistema
8 LEDi apšvietimui
24 V įtampas maitinimo šaltinis
Mažas energijos suvartojimas
CE sertifikatas : NEMKO, NO75757

Suderinamumas

Norėdami patikrinti AED suderinamumą, nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą arba eikite į: www.rotaid.com/aed-compatibility



Įvesties transformatoriaus blokas	: 100-240 V, 2,5 A (2,5 A), 50-60 Hz
-----------------------------------	--------------------------------------

Išėjimo transformatoriaus blokas	: 24Vdc, 5A (5 A)
Transformatoriaus matmenys	: 145 x 60 x 32 mm (D x Š x V)

Saugos standartai
• UL60950-1 / CSA C22.2 / TUV EN60950-1 / BSMI CNS 14336 / CCC GB4942 / PSE J60950-1
• AS/NZS 60950.1 / BIS IS 13252 / KC K60950 / EAC TP TC 004 / SIRIM MS IEC60950

Modulinė konstrukcija

Suderinama su visų gamintojų ir tipų AED.

Galimas atnaujinimas įdiegiant Rotaïd 24/7 ryšio modulį.

Reikalingas nuolatinis elektros energijos tiekimas 220V.

Pakuotė

Į komplektą įeina visos tvirtinimo medžiagos, montavimo šablonas ir instrukcija.
Dėžutės dydis 50 x 50 x 40 cm (19,7 x 19,7 x 15,75 colių), sertifikuota FSC, 100 proc. perdirbtas kartonas.





Rotaid
Priedai

Rotaid

Priedai – Informacinis stendas

Rotaid informacinis stendas užtikrina, kad į jūsų gyvybę gelbstinčią įrangą būtų atkreiptas didesnis dėmesys. Tai vertinga priemonė, skirta pamokyti pašalinius ar reaguojančius asmenis, padėkoti rėmėjui arba padidinti žinomumui.

Unikali forma puikiai dera su Rotaid spintele, sukuriama akį traukiantis ir patvarumo derinys.

Mūsų dizaino komanda pagal jūsų konkrečius norus gali sukurti specialiai jums pritaikytus standus (minimalus užsakymas 10 vnt.), užtikrindama, kad jie susisieja su vieta, aplinka ir auditorija.

Jame taip pat gali būti pateikiamos instrukcijos, kontaktinė informacija ir jūsų logotipas (minimalus užsakymas 10 vnt.).


Kadangi pagamintas iš HPL plokštės ir atspausdinta specialiais UV dažais, stendas gali būti naudojama tiek viduje, tiek lauke ir daugelį metų išlaikys savo aukštą kokybę.

Savybės

- Aukštos kokybės HPL plokštė (10 mm)
- UV spinduliams ir atmosferos poveikiui atspari spauda
- Iš anksto išgręžtos tvirtinimo skylės
- Į komplektą įeina tvirtinimo medžiagos

Dizainas

- Unikalus individualus dizainas*
- Sukurta įmonės specialistų
- Galima įsigyti visomis kalbomis

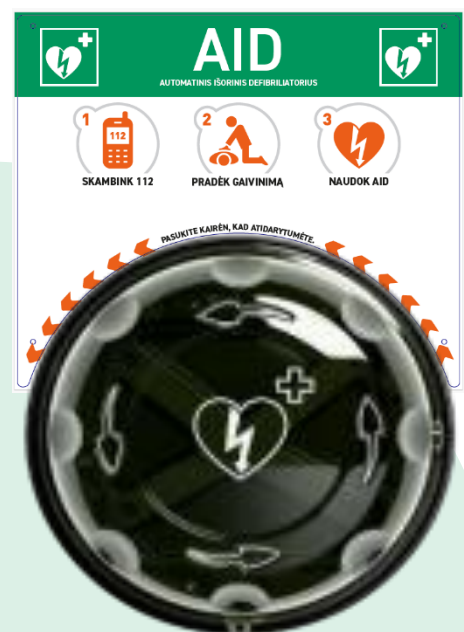

*Unikalių, individualių standų gamybai minimalus užsakymas 10 vnt.

Specifikacijos

Priedai – Informacinis stendas

Stendo matmenys

Ilgis:	41 cm
Plotis:	48 cm
Storis:	0,8 cm
Svoris:	2 kg

Matmenys stendo su spintele

Ilgis:	89 cm
Plotis:	48 cm
Gylis:	18 cm
Svoris:	8,7 kg



Rotaid

Priedai – Totem Stovas

***Rotaid Totem Stovas leidžia įrengti Rotaid defibriliatorių spintele tiek patalpoje, tiek lauke.
Tvirta konstrukcija ir akį traukiantis dizainas užtikrina, kad jūsų defibriliatorius išsiskirtų iš kitų ir galėtų būti saugiai pastatytas praktiškai bet kokioje aplinkoje ir situacijoje.***

Modulinė konstrukcija užtikrina lengvą įrengimą. Be to Totem galima lengvai išmontuoti, kai jis naudojamas mokymams ir parodoms.

Totem priekyje, nugarinėje dalyje ir viršuje galima sumontuoti informacinius standus.

Šie standai gaminami pagal individualų užsakymą, užtikrinant, kad bus pateikta visa reikalinga informacija ir derės prie aplinkos.

AED spintelė saugiai pritvirtinama prie Totem, o tvirta plieninė konstrukcija leidžia ją įrengti pačiose sudėtingiausiose aplinkose. Dviguba milteliniu būdu dengta apdaila užtikrina ilgaamžę išvaizdą.

► Skirta naudoti patalpose ir lauke

► Tvirta ir saugi konstrukcija

► Transformatoriaus laikymo vieta

Panaudojimas

- Mokymams ir parodoms
- Vietoms, kuriose nėra galimybės montuoti ant sienos, tiek viduje, tiek lauke
- Renginių metu ar išsinuomavus

Dizainas

- Pagal užsakymą sukurtas dizainas
- Pilnaspalvė spauda, apsaugota nuo UV spindulių
- Galimybė tvirtinti/fiksuoti ant grindų
- Tinka su visomis Rotaid spintelėmis



Specifikacijos

Priedai – Totem Stovas

Matmenys

Bendri

Plotis:	700 mm
Aukštis:	1615 mm
Svoris:	40 kg

Padas

Plotis:	700 mm
Storis:	5 mm
Medžiaga:	Plienas, dengtas miltelinio būdu

Stovas / stulpai

Plotis:	560 mm
Aukštis:	1715 mm
Stulpo storis:	60 mm
Medžiaga:	Plienas, dengtas miltelinio būdu

Plokštė (tarp stulpų)

Plotis:	394 mm
Aukštis:	1043 mm
Medžiaga:	ACP plokštė, 3 mm

Modifikacijos

1. Stogelis

Puiki apsauga, padedanti maksimaliai padidinti pavėsį.

2. Informacinis stendas (pagal užsakymą)

Suteikia papildomą informaciją ar instrukcijas.

3. Plokštė tarp stulpų (pagal užsakymą)

Reklamuokite savo stovą su pagal užsakymą pagamintu stendu.

4. Spalva

Galimos visos spalvos.

Produktų numeriai

30.9000

Rotaid Totem Stovas su padu ir stendu tarp stulpų.

30.9000+ 30.0001

Rotaid Totem Stovas su padu, stendu tarp stulpų ir informaciniu stendu viršuje.

30.9001

Rotaid Totem Stovas su padu, stendu tarp stulpų ir stogeliu.



 UAB "Omnia vincit" ROTAID platintojas Lietuvoje

 info@cardiaid.lt

 defibriliatoriai24.lt, cardiaid.lt

 +370 656 55 041, +370 6363 5566



 rotaid.com  info@rotaid.com  +31 (0)478 769 052

 Keizersveld 40 5803 AN, Venray Nyderlandai